




Industria Metalmecanica
 Rut: 80.695.500-0
 Vicuña Mackenna 11490, La Florida
 SANTIAGO - CHILE
 Fono: 923 20 00 - Fax: 923 20 01
 E-mail: serviciotecnico@oppici.cl
 www.oppici.cl

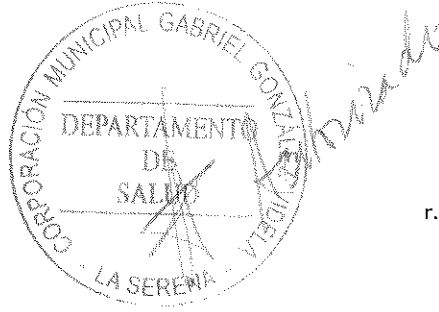

Orden de Trabajo N° 85002

r.8.2.1-1 (Actualización 05/06/2012 v.1)

Orden de Trabajo N° 85002	
Fecha Solicitud:	06-03-2015
Receptor Atención:	LINDA VERONICA CAMPODONICO LOPEZ
Cliente:	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
Giro:	SALUD Y EDUCACION
RUT Cliente:	70.892.100-9
Dirección:	ANIMA DE DIEGO 550
Comuna:	LA SERENA
Contacto:	ANDREA TAQUIAS ALFARO
Telefono:	+56 51 2544182
Correo:	ATAQUIAS@CORPORACIONGGV.CL
Modo Contacto:	MAIL
OC. Cliente:	DIRECTA

Productos y Servicios						
Nº	Codigo	Nombre	Actividad	Cantidad	Subtotal Repuesto	Subtotal Equipo
1	HR0150A1	AUTOCLAVE CAMARA HORIZONTAL DE 150 LITROS, CON AUTOGENERADOR Y UNA PUERTA Cliente reporta falla de equipo	REPARACION	1	0	--
Obs. no ingreso serie : 1087						
Ubicacion : 15						
1.1	26PT032	PRESOSTATO DANFOSS 0,2 - 8 BAR (CT)		1	\$ 42.691	--
1.1	26GE151	M.O. SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE HORIZONTAL RECTANGULAR HR		1	\$ 185.000	--
SubTotal Equipo.						\$ 227.691
SubTotal Gral.						\$ 227.691
IVA(19%)						\$ 43.261
Total Gral.						\$ 270.952

Agregar articulo

Información de Entrega			
Fecha Atención	06-03-2015	Trabajador(es)	German Neira Alvial--
Forma de Pago	30 Días	Plazo Entrega	15 dias habiles
Lugar Reparación/Servicio	Ubicada en: Cesfam Pedro Aguirre Cerda - La serena.		

Condiciones Generales

- La fecha de visita será reconfirmada al momento de recibir la Orden de Compra o una confirmación por escrito.
- Las Visitas fuera de Santiago, se deben coordinar, con a lo menos una semana de anticipación.
- Los horarios de trabajo de las visitas son de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 hrs, y viernes de 8:00 a 13:00 hrs, salvo condición especial, por cotizar.
- La garantía de las reparaciones y mantenciones es de 3 meses, a contar de la fecha de recepción de los trabajos.
- Los valores expresados en esta Orden de Trabajo solo son REFERENCIALES. Se cotizan sólo en base a los antecedentes entregados por el cliente. El presupuesto final y definitivo será enviado al cliente una vez finalizados los

trabajos y el técnico esté devuelta en nuestra planta, el cual incluirá todos los materiales y repuestos realmente utilizados y el tiempo real empleado en la reparación - mantención.

- Si de acuerdo a la información recopilada en terreno por el técnico, y contando con la autorización del cliente, procede a reparar y cambiar repuestos, se entenderá como "aceptado" el posterior Presupuesto de Reparación. La firma del cliente en el formulario Reporte de Servicio, será la aceptación del nuevo Presupuesto por Reparación.

- En caso de realizar sólo una evaluación en terreno, el valor de la Mano de Obra de esta será descontado del presupuesto final si el cliente decide realizar el arreglo completo; de lo contrario se facturará solo la visita de Evaluación.

- En caso que el presupuesto considere la reparación de uno o más equipos, será el técnico en terreno quien decidirá si podrá llevar a cabo el trabajo de reparación, basado en la envergadura y naturaleza del problema y viabilidad de dar solución de manera óptima en terreno. En caso que el técnico decidiera no se puede realizar la reparación, el servicio incluido en esta Orden de Trabajo se transformará automáticamente en una Evaluación. Esta Evaluación se regirá por las condiciones del punto anterior. Luego, con los antecedentes recopilados por el técnico, se generará un nuevo presupuesto por reparación, incluyendo los materiales a utilizar.

- Las cotizaciones tienen una validez de 15 días hábiles.

CLIENTE: **C. M. GABRIEL Gonzalez Videla** RUT: **70-892.100-9** FECHA: **6/03/2015**
 SEDE O SUCURSAL: **Cesfam Pedro AGUIRREZ CERVO**

TIPO DE TRABAJO: **MANTENCIÓN** MODELO EQUIPO: **HR0150A2** SERIE: **1084-15**

MANTENCIÓN REPARACIÓN PRESUPUESTO INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA CAPACITACIÓN OTRO

CORRESPONDIENTE A LA MANTENCIÓN: **981** RESULTADO DE LA O.T.: FINALIZADA PENDIENTE
 CICLOS: **981** GARANTIA: SI NO

PROGRAMA MODELO SEDILE	DESCRIPCION	APROBADO	RECHAZADO	PRESION	VALORES (P Y TIEMPO)
BIBERONES	Programa a 121°C con 25 minutos de exposición, sin vacío ni secado, con descarga lenta con evacuación por gravedad.				
BIBERONES CON SECADO	Programa a 121°C con 15 minutos de exposición, con dos pre-vacíos y secado final.				
FORMULAS NORMALES	Programa de fórmulas lácteas a 114°C con exposición de un minuto, con enfriamiento y contra presión.				
FORMULAS DELICADAS	Programa de fórmulas lácteas a 100°C con exposición de un minuto, con enfriamiento y contra presión.				
FORMULAS SENSIBLES	Programa de fórmulas lácteas a 90°C con exposición de un minuto, con enfriamiento y contra presión.				
CALENTAR FORMULAS	Calentamiento de fórmulas lácteas hasta alcanzar una temperatura determinada.				

PROGRAMA MODELOS HR	DESCRIPCION	APROBADO	RECHAZADO	PRESION	VALORES (P Y TIEMPO)
LIQUIDOS	Programa a 121°C con 25 minutos de exposición, sin vacío ni secado, con descarga lenta por evacuación por gravedad.				
GOMAS	Programa a 121°C con 15 minutos de exposición, con tres pre-vacíos y secado.				
/ TEXTIL	Programa a 134°C con 5 minutos de exposición, con tres pre-vacíos y secado final.				
INSTRUMENTAL	Programa a 134°C con 4 minutos de exposición, con dos pre-vacíos y secado final.				
BOWIE & DICK	Programa a 134°C con 3,5 minutos de exposición, con tres pre-vacíos (sin secado).				
PRION	Programa a 134°C con 30 minutos de exposición, con tres pre-vacíos y secado final.				
HELIX	Programa a 134°C con 3,5 minutos de exposición, con tres pre-vacíos y secado final.				

PROGRAMA MODELOS VC100	DESCRIPCION	APROBADO	RECHAZADO	PRESION	VALORES (P Y TIEMPO)
PROGRAMA 1	Programa a 121°C con ___ minutos de exposición, con descarga lenta gravitacional				
PROGRAMA 2	Programa a 134°C con ___ minutos de exposición, con descarga lenta gravitacional				

PROGRAMA LC0620	DESCRIPCION	APROBADO	RECHAZADO	PRESION	VALORES (P Y TIEMPO)
NORMAL	3,2 MINUTOS				
SUAVE	1,2 MINUTOS				
INTENSIVO	3,53 MINUTOS				

DESARROLLO

DIAGNOSTICO/CAUSA/PROBLEMA: *Liente Interna que solo veían por presentata se revisa equipo y se encuentra presentata coladera con filtración por membrana producto de la calidad de Agua*

SOLUCION: *Se cambio presentata donless (coladera). se prueba funcionamiento coladera ok. equipo operativo.*

REPUESTOS UTILIZADOS

IMPORTANTE TOMAR FOTOS ANTES Y DESPUES DEL TRABAJO

REPUESTOS	SERIE CT	CANTIDAD	EN GARANTIA	MOTIVO PARA DEJARLA PENDIENTE
<i>Presentata Donless</i>	<i>015-28958-901</i>	<i>1</i>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	

RECOMENDACIONES: *se debe cambiar Ablandador de Agua se lleva Muestra*